

Clearblue DIGITAL

1 Udfør testen

Hvis du foretager testen fra den dag, du forventer at få menstruation, kan du teste når som helst på dagen. Hvis du tester tidligt, skal du bruge den første morgenurin.

- Når du er klar til at teste, skal du tage testpinden ud af beskyttelsesfolien og fjerne den blå hætte. Testpinden skal bruges med det samme.
- Under hele testen må du **aldrig** holde testpinden, så den absorberende del pejer opad.

ENTEN

Teste i din urinstråle

- Hold den sugende del ned i urinstrålen i **kun 5 sekunder**.
- Sørg for, at resten af testpinden ikke bliver våd.
- Du kan eventuelt sætte hættten på igen, og lægge testpinden vandret.

ELLER

Indsamle en urinprøve i en ren, tør beholder

- Hold kun den sugende del ned i urinen, som vist på billedet, i **kun 20 sekunder**.
- Du kan eventuelt sætte hættten på igen, og lægge testpinden vandret.




Sugende del

Hætte

3 Se resultatet

- Inden for **3 minutter** vises resultatet på displayet.
- Nogle resultater kan vises efter blot 1 minut.
- Resultatet bliver stående på displayet i ca. 24 timer.

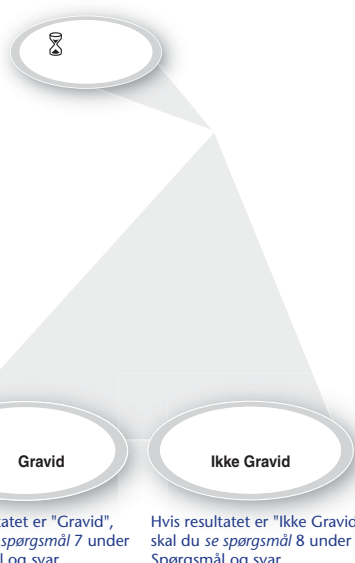

Hvis resultatet er "Gravid", skal du se spørgsmål 7 under Spørgsmål og svar.

Hvis resultatet er "Ikke Gravid", skal du se spørgsmål 8 under Spørgsmål og svar.

2 Vent...

- Ventesymbolet blinker for at vise, at testen virker.
- Når ventesymbolet holder op med at blinke, kommer resultatet frem. Hvis ventesymbolet ikke vises, når du har brugt testen, skal du se spørgsmål 5 under Spørgsmål og svar.



Spørgsmål og svar – Læs afsnittet for at finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Testfejl Læs afsnittet "Testfejl", hvis du har brugt testpinden, og displayet viser følgende:



Bog



Blank

Bortskaffelse af Clearblue Digital Graviditetstest

- Før du bortskaffer testen, skal du fjerne batterier fra testpinden. Sæt en mønt i revnen bag på testpinden. Åbn plastikskiven.
- Fjern batterier, og bortskaf det i henhold til de lokale miljøregler. **Forsigtig!** Batterier må ikke skilles ad, genoplades eller brændes. Må ikke sluges. Opbevares utilgængeligt for børn.
- Bortskaf resten af testpinden i henhold til de lokale miljøregler for elektronisk udstyr.
- Elektronisk udstyr må ikke brændes.



Spørgsmål og svar

1. Hvor sikker er en Clearblue Digital Graviditetstest?

Laboratorieforsøg har vist, at Clearblue Digital Graviditetstest er mere end 99% sikker, når den bruges fra den dag, menstruation forventes at begynde.

2. Hvordan fungerer en Clearblue Digital Graviditetstest?

Når du er gravid, producerer kroppen graviditetshormonet hCG (humant choriongonadotropin). Tidligt i graviditeten producerer kroppen en øget mængde hCG. Clearblue kan registrere ganske små mængder af dette hormon i din urin.

3. Hvornår kan jeg teste med en Clearblue Digital Graviditetstest?

Clearblue Digital Graviditetstest kan bruges op til 4 dage før forventet menstruation. Hvis du udfører testen for forventet menstruation og får et "Ikke Gravid"-resultat, er der stadig en chance for, at du er gravid. I nedenstående tabel kan du se resultaterne af de kliniske forsøg med tidlig testning med Clearblue Digital Graviditetstest.

Tidlig testning

Clearblue anbefaler, at du tester fra den dag, du forventer at få menstruation. Mængden af graviditetshormon stiger dog hurtigt tidligt i graviditeten, og Clearblue kan bruges op til 4 dage for forventet menstruation. I kliniske forsøg med prøver tidligt i graviditetsforløbet gav Clearblue Digital Graviditetstest følgende resultater:

Antal dage for forventet menstruation	% af prøver fra gravide kvinder, som gav resultatet "Gravid"
-1	95%
-2	90%
-3	82%
-4	51%

For at finde ud af, hvornår du kan forvente at få menstruation, skal du beregne, hvor lang din cyklus normalt er, ved at tælle antallet af dage fra den første dag af menstruation til dagen før næste menstruation begynder.

- Hvis din menstruationscyklus er uregelmæssig, bør du tage højde for din længste menstruationscyklus inden for de seneste måneder, før du tester.
- Hvis du ikke ved, hvornår du skal have menstruation, anbefaler vi at teste mindst 19 dage efter den dag, hvor du sidst havde samlede uden prævention.
- Hvis du foretager testen fra den dag, du forventer at få menstruation, kan du teste når som helst på dagen. Hvis du tester tidligt, skal du bruge den første morgenurin. Undlad at drikke store mængder væske, før du udfører testen.
- Hvis resultatet er "Ikke Gravid", og du stadig har mistanke om, at du er gravid, kan du se spørgsmål 8.

4. Kan nogen former for medicin eller sygdomme påvirke resultatet?

- Læs altid produktens indlægsseddel til eventuel medicin, du tager, før du udfører en test.
- Fertilitetslægemidler, der indeholder hCG, kan give misvisende resultater (disse fertilitetslægemidler indgives som regel ved injektion, og hvis du tester for tidligt, efter at du har taget et sådant lægemiddel, kan det give et falskt "Gravid"-resultat).
- Andre fertilitetsbehandlinger (såsom clomifencitrat), smertestillende lægemidler og hormonelle præventionsmidler (f.eks. p-piller) bør ikke påvirke resultatet.

- Hvis du for nylig er holdt op med at tage et hormonelt præventionsmiddel, eller du får fertilitetsbehandling med eksempelvis clomifencitrat, kan dine menstruationscyklusser være uregelmæssige, så du kommer til at teste for tidligt.
- Hvis du for nylig har været gravid (også selvom graviditeten blev afbrudt), kan du få et falskt "Gravid"-resultat.
- Graviditet uden for livmoderen, ovariecyster, overgangsalder og visse sjældne sygdomme kan give misvisende resultater.
- Hvis resultatet er "Gravid", vil du muligvis senere konstatere, at du ikke er gravid, på grund af den naturlige graviditetsafbrydelse, som kan optræde i de tidlige stadier. Hvis du får uventede resultater, bør du drøfte dem med din læge.

5. Jeg har brugt testen, men ventesymbolet kom ikke frem. Hvad betyder dette?

Testen er ikke blevet udført korrekt. Se under Testfejl.

6. Jeg har brugt testen, men der fremkom ikke noget resultat på displayet. Hvad betyder dette?

Resultatet bør fremkomme på displayet inden for 3 minutter. Hvis der ikke fremkommer et resultat, skal du se under Testfejl.

7. Testen siger, at jeg er "Gravid". Hvad bør jeg gøre?

Hvis resultatet er "Gravid", bør du besøge din læge, som kan rådgive dig om, hvad du skal gøre herefter.

8. Testen siger at jeg er "Ikke Gravid". Hvad bør jeg gøre?

Du er muligvis ikke gravid, eller mængden af graviditetshormon er muligvis endnu ikke højt nok til at påvise, eller du kan have fejlberegnet datoen for, hvornår du skulle have menstruation.

- Hvis du testede tidligt, skal du teste igen, når du skal have menstruation.
- Hvis din menstruation er udeblevet, skal du teste igen efter 3 dages tid. Hvis denne test giver et "Ikke gravid"-resultat, og du stadig ikke har fået menstruation, bør kontakte din læge.

Testfejl

Bog – der er opstået en fejl under testen.

Det kan skyldes:

- at den sugende del ikke blev holdt nedad, eller at testen ikke blev lagt vandret, efter at der blev påført urin.
- der blev påført for meget eller for lidt urin.
- Du bør tage testen igen med en ny test og følge vejledningen nøje.

Blank

Hvis displayet er tomt, efter at du har brugt testen, bedes du kontakte Clearblue produktrådgivning for at få yderligere oplysninger.



Hvis du vil have yderligere oplysninger om Clearblue, kan du ringe til Clearblue Produktrådgivning.

80 88 60 29

Samtalen er gratis

Du bør have pakken ved hånden, så du kan opgive produktionsnummeret [LOT].

Samtalerne kan blive taget op i kvalitets sikringsøjemed.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger og generelle råd om graviditetsspørgsmål, kan du besøge vores hjemmeside:

www.Clearblue.info

Denne enhed er egnet til hjemmebrug. Kun til in vitro-diagnoser. Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares utilgængeligt for børn. Til engangsbrug. Må ikke bruges, hvis beskyttelsesfolien er beskadiget. Må ikke bruges, hvis udløbsdatoen er overskredet. Disse instruktioner gælder modellenummer 506559



0843

EMC – Vejledning og Producentens erklæring

Clearblue Digital Graviditetstest er beregnet til brug i elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor.

Kunden eller brugeren af Clearblue Digital Graviditetstest bør sikre sig, at den anvendes i et sådant miljø. Dette produkt er testet i henhold til EN60601-1-2:2002.

Elektromagnetiske emissioner			Elektromagnetisk immunitet		
Test	Overholder	Elektromagnetisk miljø – vejledning	Test	Grad af overholdelse	Elektromagnetisk miljø – vejledning
RF-emissioner CISPR 11	Gruppe 1	Clearblue Digital Graviditetstest anvender udelukkende RF-energi til dens interne funktion. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens med tætstående elektronisk udstyr.	Elektrostatisk afladning IEC61000-4-2	±6kV kontakt ±8kV luft	Gulvene bør være af træ, cement eller keramiske fliser. Hvis gulvene er tildækket med syntetisk materiale, bør den relative luftfugtighed være mindst 30%.
RF-emissioner CISPR 11	Klasse B	Clearblue Digital Graviditetstest er egnet til brug i alle bygninger, herunder private hjem.	RF-stråling IEC61000-4-3 (3)	3V/m (fra 80MHz til 2,5 GHz)	d = 1,2xP fra 80 MHz til 800 MHz d = 2,3xP fra 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er senderens maksimale nominelle strømstyrke, og d er den anbefalede afstand til senderen i meter.

NOTE a). Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, objekter og personer.